

NEW series

新製品

スポーツトレーナー向け低周波
オーゴスペルDX-40

低周波電気刺激装置 オーゴスペル

AUGOSPEL DX-40



簡単・コンパクト、しかも4チャンネルタイプ
壁掛け使用にも対応



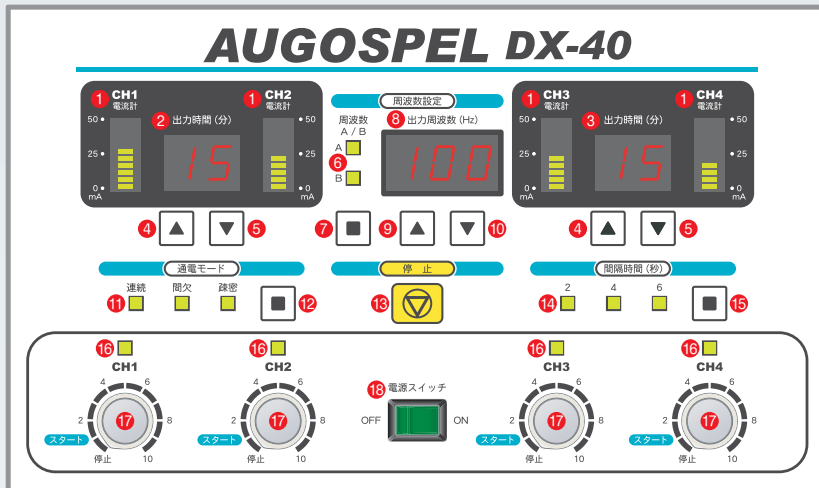
壁掛けタイプ



温熱ユニット一体タイプ

..... Technology for Human
OSHIMA MEDICAL INDUSTRIES

低周波電気刺激装置 オーゴスペル

AUGOSPEL
DX-40

- ① 出力電流モニタ CH1～CH4 ⑪ 通電モード表示灯
 ② 出力時間(タイマ)表示器-1 ⑫ 通電モード切換ボタン
 ③ 出力時間(タイマ)表示器-2 ⑬ 停止ボタン
 ④ 出力時間設定ボタン(アップ) ⑭ 間隔時間表示灯
 ⑤ 出力時間設定ボタン(ダウン) ⑮ 間隔時間切換ボタン
 ⑥ 周波数A/B表示灯 ⑯ チャンネル出力表示灯
 ⑦ 周波数A/B切換ボタン ⑰ 出力強度調整ボリューム
 ⑧ 出力周波数表示器 ⑱ 電源スイッチ
 ⑨ 周波数設定ボタン(アップ)
 ⑩ 周波数設定ボタン(ダウン)

DX-40本体
付属品

低周波導子

ベルクロ
バンド(大)

導子掛け

標準付属品

- 低周波導子
- ベルクロバンド(大)
- ACアダプター
- 石膏ボード用アンカー
- 壁掛け取付ビス

オプション付属品

- ゲル導子 ●導子掛け
- ベルクロバンド(小)

温熱ユニット
付属品温熱低周波導子
タイプ

温熱B5導子タイプ

標準付属品

- 温熱低周波導子又は
温熱B5導子
- 中継コードS (30cm)
- スベリ止シート

オプション付属品

- 中継コードL (2m)
- ※DX-40を壁掛けタイプで使用する
場合に必要になります。

非医療機器 オーゴスペル DX-40(本体) 仕様

電 源	ACアダプター入力 出力: DC15V, 1.2A以上
消費電力	10W
本体寸法	330(W)×210(D)×165(H) mm
重 量	約4kg
出力数	4チャンネル
通電モード	連続/間欠/疎密の3種類 変調のインターバルタイムは2/4/6秒
出力周波数	A波: 1~999Hz 1Hz ステップ B波: 1~999Hz 1Hz ステップ(疎密モード時にのみ使用)
出力波形	双方向性指数関数波
出力電圧	最大 350Vp-p max
出力電流	最大 25mA rms (500Ω負荷時)
出力表示	電流計: 50mA フルスケール
タイマー	1~30分 1分設定、残り時間デジタル表示(2チャンネル毎に独立設定)

非医療機器 温熱ユニット 仕様

電 源	ACアダプター入力方式 出力: DC24V, 2.7A
消費電力	27W
本体寸法	330(W)×215(D)×46(H) mm
重 量	約2.3kg
出力数	2または4チャンネル
温熱設定	保温/温熱の2ステップ
タイマー	DX-40に連動

※温熱ユニットをDX-40本体と接続する場合には、下記の2種類の
タイプがあります。

温熱ユニット一体タイプ

標準付属品の中継コードS (30cm) をDX-40本体に接続して使用します。

温熱ユニット分離タイプ

オプション付属品の中継コードL (2m) をDX-40本体に接続して使用します。

オーゴスペル

<http://www.ooshima.me>


安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。

※仕様及び寸法等は変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

■販売元

理学療法機器



株式会社 大島製作所

本 社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-21-7 ☎03(3654) 7205

関西営業所 〒578-0965 東大阪市本庄西3-7-38 ☎06(6744) 0348

名古屋営業所 〒451-0054 名古屋市中区南堀越1-18-15 ☎052(521) 2310

福岡営業所 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-2-5 ☎092(592) 3191

■製造販売元: 平和電子工業株式会社 大阪府四條畷市 下田原1510番地